


MMO5000

medstrom⁺

Improved Patient Outcomes

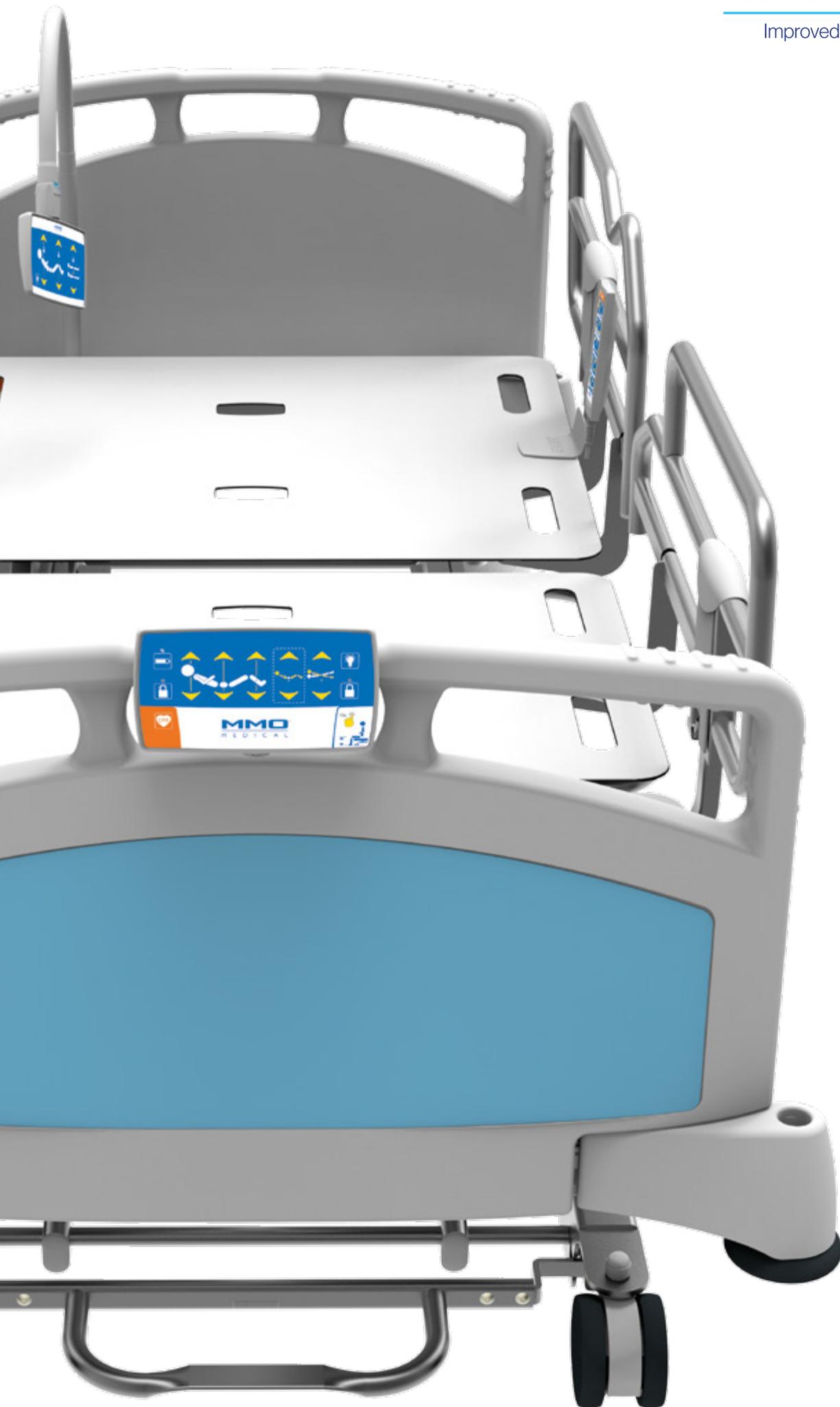

MMO[®]
M E D I C A L

MMO5000



Le lit MMO5000 est destiné à l'environnement hospitalier, permettant d'équiper les unités de soins spécialisés. Grâce aux multiples fonctionnalités, le lit MMO5000 facilite les soins en toute sécurité, assurant confort et ergonomie pour le patient et les équipes de soins.



MMO 5000 avec des demi-barrières.



La mission de la société MMO est de proposer au secteur de la santé des lits médicalisés apportant des solutions performantes.

Le lit MMO5000 est adapté à la prise en charge des patients, véritable outil de travail, il contribue activement au rétablissement du patient.



Savoir répondre aux besoins



Du patient

- Sécurité
- Dignité
- Rétablissement
- Facilité d'utilisation
- Confort



Du décideur

- Respect des normes
- Rapport qualité prix
- Solution clé en main
- Réduction des accidents du travail
- Garantie



Du personnel soignant

- Sécurité
- Nettoyabilité
- Ergonomie
- Simplicité d'utilisation
- Formation clinique



Du personnel de maintenance

- Formation technique
- Fiabilité
- Service après-vente
- Support technique
- Hot Line 24h/24h - 7j/7j - 365j/365j

ERGONOMIE



La position confort permet de :

- Assurer une meilleure répartition des points d'appui.
- Diminuer les points de pression des zones fragilisées.
- Maintenir une bonne ventilation pulmonaire.



La proclive permet de positionner le patient en position fauteuil et de l'asseoir en toute sécurité dans son lit.

La déclive permet de repositionner le patient vers la tête de lit sans aucun effort pour le soignant.





Les 2 manettes CPR sont accessibles en tête de lit de chaque côté du relève buste, permet une remise à plat d'urgence.

La translation

L'amplitude de la translation synchronisée de 23 cm du plan de couchage évite les complications résultant de la compression des organes internes dans la région abdominale.

Elle réduit également les phénomènes de « friction » et de « cisaillement » qui sont responsables du développement des escarres.

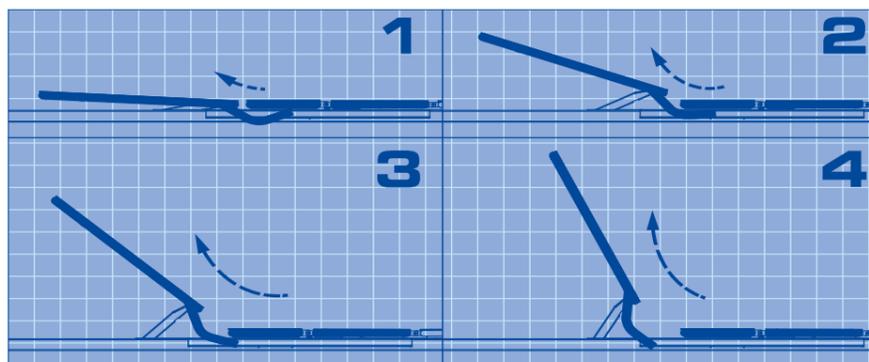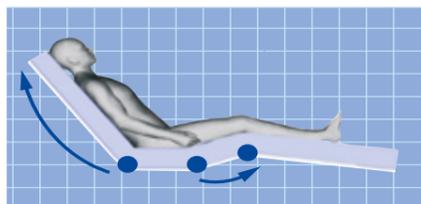

Désinfection et lutte contre les maladies nosocomiales

Les surfaces planes et amovibles permettent une hygiène parfaite de décontamination de l'ensemble du lit MMO5000. L'absence de châssis bas et la grande maniabilité du lit permettent une accessibilité totale pour le nettoyage de la chambre.



Nettoyage du sol facile

SÉCURITÉ

Protection optimale contre les chutes



Le lit MMO5000 assure la sécurité et la protection du patient pendant son hospitalisation en proposant :

- Une position ultra-basse, de 19 ou 21 cm du sol suivant le diamètre des roues.
- Une personnalisation de la hauteur variable pour chaque patient permettant une autonomie pour déambuler.
- Des demi-barrières ou des barrières 3 barreaux pour des matelas jusqu'à 15 cm d'épaisseur ou 4 barreaux pour des matelas jusqu'à 26 cm d'épaisseur.



Directives européennes
93/42/CEE
NF EN 60601-2-52



Les chutes entraînent trop souvent des traumatismes graves et prolongent l'hospitalisation : 80% des chutes ont lieu dans la chambre, 60% autour du lit.

Freinage centralisé

Le MMO5000 permet un freinage centralisé et sécurisé :

- Arrêt automatique à 22 ou 24 cm du sol (suivant roulettes)
- Un appui supplémentaire enclenche le freinage centralisé associé à un signal sonore. Arrêt définitif à 19 ou 21 cm du sol (suivant roulettes).




CONFORT

Déplacement et brancardage

Le jeu de 8 roulettes multidirectionnelles de 100mm, offre une maniabilité exceptionnelle. Il permet de déplacer le lit dans tous les sens et sans aucun effort lors du nettoyage dans la chambre. En mode directionnel, le lit MMO5000 se révèle encore plus manœuvrable et assure un brancardage aisé par une seule personne.



Roues multidirectionnelles

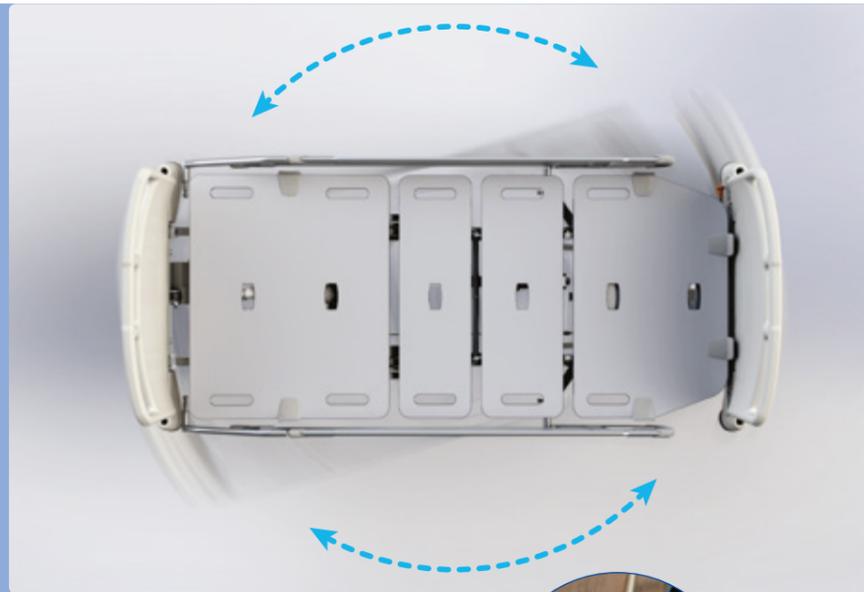

La butée murale sécurise la proximité du lit avec le mur. Elle permet une mise en place rapide et facile. La butée est escamotable lors des déplacements longs du lit.



Installation du lit facilitée

Freinage, dossiers et barrières



Accessibilité du freinage

Le freinage bilatéral est actionnable à l'avant, à l'arrière et sur les côtés du lit, par simple pression du pied.

Freinage automatique

Lorsqu'il atteint sa position ultra basse, le lit est freiné automatiquement.




Mise en place des barrières avec une main simplifiée

Les demi-barrières sont des dispositifs permettant la sécurisation de la surface de couchage du lit MMO5000 afin de protéger les patients des chutes. C'est aussi une aide à la mobilisation pour la sortie du lit.


La surface du lit reste sécurisée lors des soins sur les zones thorax, abdomen et bassin. L'accès au patient est simple en abaissant la barrière de la zone concernée. Le positionnement de housses de protection assure une protection optimale pour les patients agités.




Faible encombrement en position basse des barrières

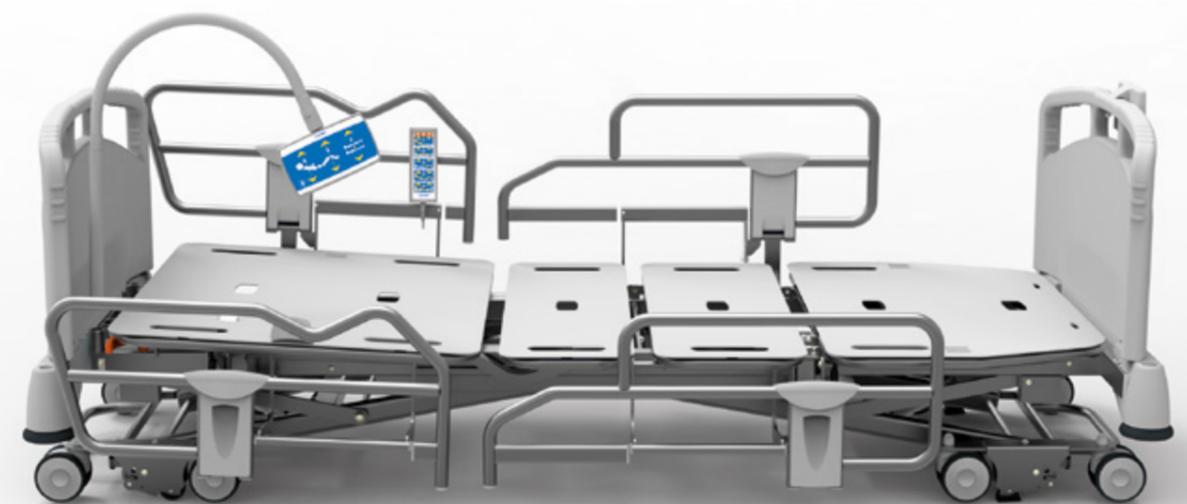

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

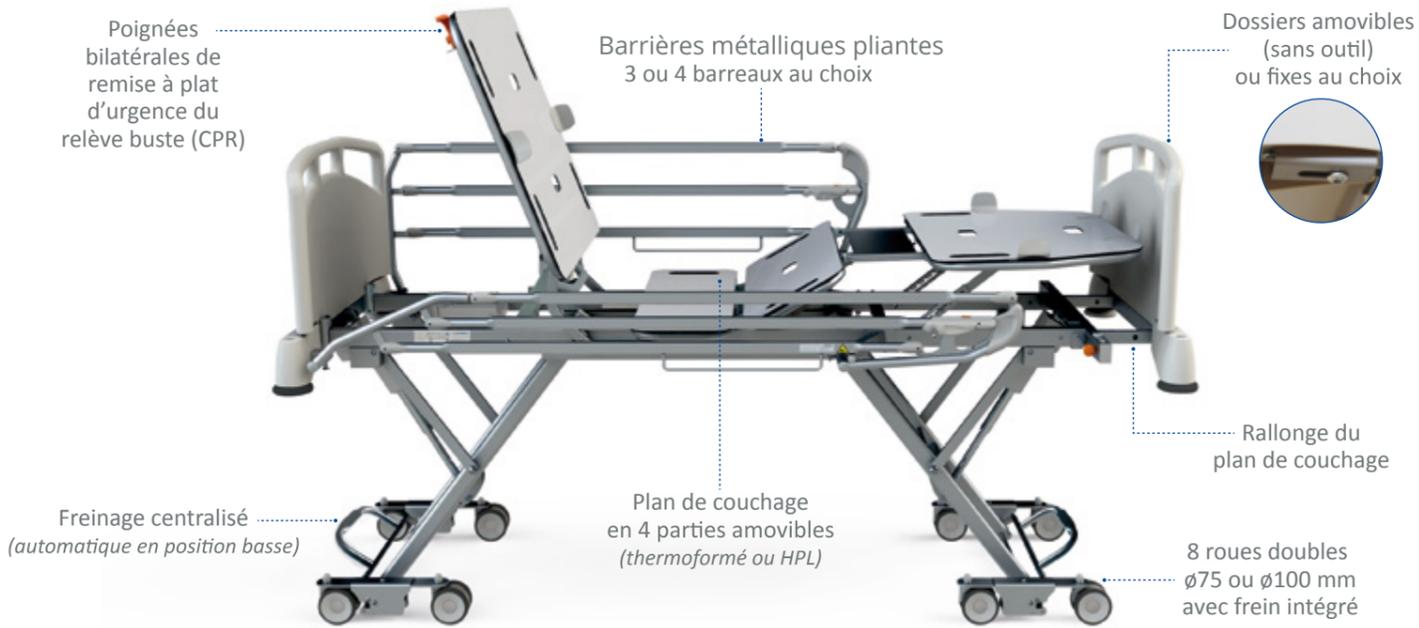

ACCESSOIRES

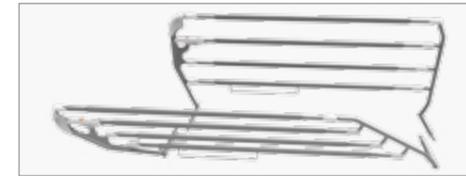

Jeu de barrières pliantes métalliques 3 barreaux pour matelas jusqu'à 15cm d'épaisseur 4 barreaux pour matelas jusqu'à 25cm d'épaisseur



Jeu de housses matelassées pour barrières métalliques 3 ou 4 barreaux



Jeu d'obturateurs pour barrières pliantes 3 ou 4 barreaux




Potence simple finition époxy avec poignée réglable



Potence simple finition époxy poignée enrouleur



Potence orientable finition époxy poignée enrouleur

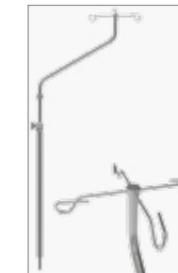

Tige Porte Sérum télescopique inox 4 crochets



Tige Porte Sérum époxy 2 crochets


Dossier de lit plastique



Un grand choix de finitions
Consulter notre nuancier
<http://www.mmomedical.fr/les-outils-mmo.html>

Télécommande

Positions du lit pré-programmées

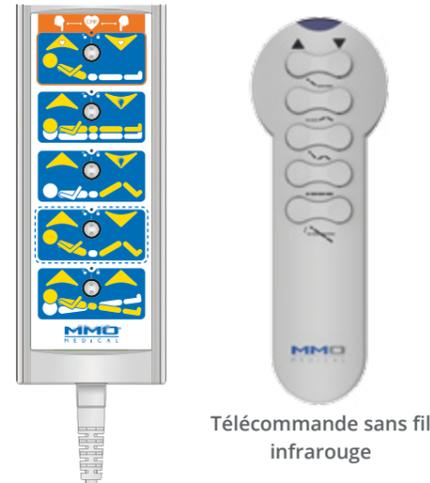

Rallonge intégrée du plan de couchage 18 cm



Butée murale escamotable



Support pour télécommande



Support flexible pour télécommande



Porte urine pour lit




Porte bocal pour lit



Jeu de barres support accessoires



Boîtier soignant avec condamnation des fonctions électriques

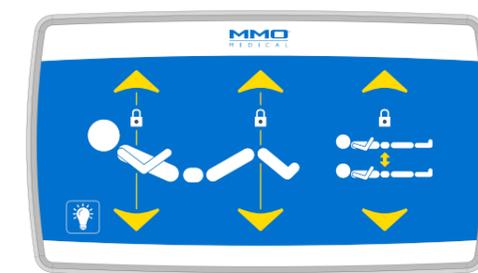

Satellite patient

Caractéristiques techniques

- Dimensions du plan de couchage: 200 x 90 cm
- Largeur x longueur totales: 99,8 x 214 cm
- Largeur x longueur totales avec barrières: 99,8 x 214 cm
- Position mini/maxi : 19 cm/83 cm
- Proclive/déclive : 14°/+14°
- Angle d'inclinaison du relève buste : 70°
- Angle d'inclinaison de la plicature genoux : 30°
- Angle d'inclinaison du relève jambes : 20°
- Charge de sécurité: 250 kg
- Capacité maximale de levage: 350 kg
- Rallonges

Standard configuration

- Hauteur variable et relève-buste électriques
- Translation de 23 cm du relève buste
- Remise à plat de secours du relève buste
- Relève jambes monobloc manuel
- Télécommande filaire avec condamnations sélectives des fonctions électriques
- 4 supports tige porte-sérum 2 en tête et 2 en pied de lit
- 2 supports potence en tête de lit
- Dossiers tête et pied au choix

Options

- Remise à plat d'urgence bilatérale du relève buste (CPR)
- Plicature genoux électrique
- Rallonge intégrée du plan couchage de 18 cm
- Télécommande infra rouge sans fil
- Récepteur infra rouge
- Deux télécommandes: infra rouge et filaire



MMO SAS au capital de 800 000 € - R.C.S RENNES - SIRET 789 620 051 00019 - N° d'identification TVA - FR79 789620051 - Modèles dérivés - Propriété exclusive de la société MMO - Toute imitation ou contrefaçon sera passible de poursuites en fonction de la loi N° 79-48 du 18 janvier 1979. Ce document n'est pas contractuel. Dans un souci constant d'évolution, la société MMO se réserve le droit d'apporter toutes modifications sur le plan technique et technique. La marque MMO est un marque déposée par MMO.

10/2015 B.C.

medstrom⁺
Improved Patient Outcomes

+ Suisse
Tel: +41 26 323 20 30
Email: info@medstrom.ch
www.medstrom.ch

MMO[®]
INTERNATIONAL

SIÈGE SOCIAL, USINE ET SERVICES ADMINISTRATIFS :
24 Route de Beauvais - BP 90148 - 35501 VITRÉ cedex - FRANCE
Téléphone : +33 (0)2 99 75 04 50 - FAX : +33 (0)2 99 74 65 71
Email : info@mmoiinternational.fr
www.mmoiinternational.fr

Certains coloris représentés sur ce document peuvent évoluer selon notre nuancier

